



Hydralix *Lidocaine*

Gel Estéril de Ácido Hialurónico Reticulado



Hydralix

Gel Estéril de Ácido Hialurónico Reticulado

Distribuidor exclusivo en España, Andorra y Portugal

THR MEDICAL
PRODUCTS

Luminera

NUESTRO RELLENO DE ÁCIDO HIALURÓNICO

Hydryalix (Gentle / Deep / Ultra Deep / Lips) es un gel inyectable estéril y apirógeno adecuado para el aumento de los tejidos blandos. Está compuesto de ácido hialurónico reticulado de procedencia no animal. El gel está libre de látex y es viscoelástico, transparente y biodegradable.

Composición

- Hialuronato de sodio (20mg/ml), reticulado (BDDE<2ppm)
- 0,3% lidocaína (también disponible sin lidocaína)



Hydryalix se presenta en una caja de 2 jeringas precargadas graduadas de 1.25ml cada una

¿POR QUÉ HYDRYALIX?

- Proporciona un efecto, volumen y relleno de larga duración.
- La longevidad de las moléculas de AH se incrementa por el proceso de reticulación.
- Mínima incomodidad durante el tratamiento debido a la adición de lidocaína.
- Fabricado con la tecnología Hybrid MoBi™.
- Biodegradable y biocompatible.
- Ingrediente activo seguro de origen no animal.

HYBRID MoBi™

LA TECNOLOGÍA HYBRID MoBi™ DE LUMINERA – NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO, OFRECE LAS VENTAJAS DEL GEL MONOFÁSICO Y LAS PROPIEDADES DEL GEL BIFÁSICO.

El **gel monofásico** es homogéneamente reticulado, genera un gel suave, uniforme, reduce los efectos secundarios tales como la hinchazón y el efecto Tyndall y usa menos BDDE para el proceso de reticulación. El gel monofásico es 100% reticulado.

El **gel bifásico** consta de dos fases, una fase altamente reticulada de partículas de ácido hialurónico y una fase no reticulada en la que las partículas de ácido hialurónico están suspendidas. Se necesita esta fase no reticulada para permitir la inyección.

En nuestra tecnología Hybrid MoBi™ el gel es monofásico, completamente homogéneo, suave y fácil de inyectar. El gel se corta en diferentes tamaños de partículas, generando una línea de productos diferenciados que están destinados a diversas indicaciones. La naturaleza de las partículas de gel ofrece la capacidad de moldear el material inyectado a la forma deseada en el tejido y le da al producto su firmeza. Una propiedad que se encuentra solo en la línea de productos Hydralix y no en los productos monofásicos estándar que están disponibles en el mercado.

CAPACIDAD DE VOLUMINIZACIÓN



La línea de productos Hydralix ofrece 4 viscosidades distintas del producto, permitiendo diversas capacidades de volumen y la personalización del tratamiento para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente.



INDICACIONES


PROFUNDIDAD
DE LA
INYECCIÓN

TAMAÑO DE
LA PARTÍCULA
DE GEL


TAMAÑO DE
AGUJA
RECOMENDADO

GENTLE

- Líneas superficiales
- Arrugas finas a moderadas
- Daños menores de la piel
- Arrugas, líneas y pliegues peribucles

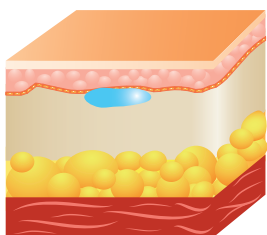

Dermis media y superficial

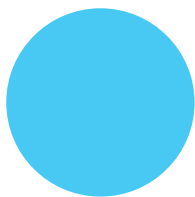


100-300 µm


27G o 30G de pared fina

LIPS

- Aumentar el volumen facial y la restauración del óvalo facial
- Perfilar el contorno labial y aumentar su volumen

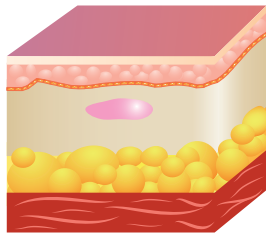

Mucosa labial

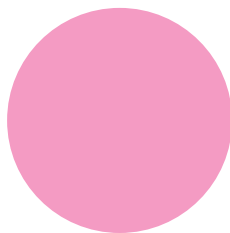


600-800 µm


25G o 27G de pared fina

DEEP

- Corrección de arrugas faciales profundas y pliegues tales como el nasogeniano y líneas de marioneta
- Aumentar el volumen labial
- Aumentar el volumen de pómulos

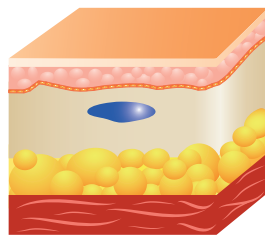

Dermis profunda

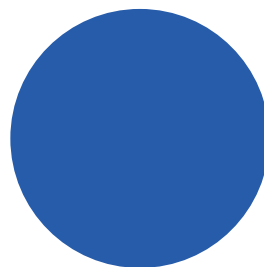


700-900 µm


25G o 27G de pared fina

ULTRA DEEP

- Corrección de arrugas faciales profundas y en el nasogeniano
- Remodelado del óvalo facial
- Aumentar el volumen de pómulos

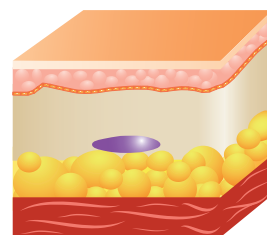

Dermis profunda, subcutánea y área preperióstica

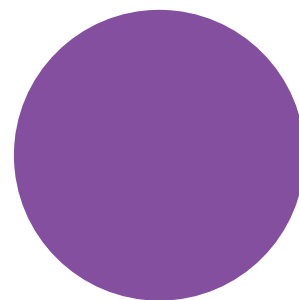

900-1100 µm

25G o 27G de pared fina





ÁREAS DE TRATAMIENTO



ANTES



DESPUÉS

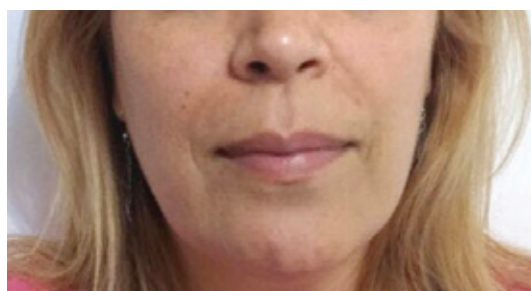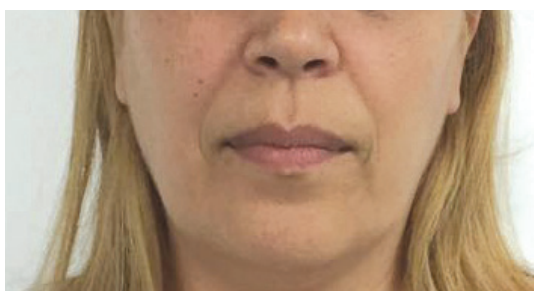

Las imágenes no han sido manipuladas.



 **Hydralix** *Lidocaine*
Gel Estéril de Ácido Hialurónico Reticulado

 **Hydralix**
Gel Estéril de Ácido Hialurónico Reticulado

**THR MEDICAL
PRODUCTS**

Distribuidor exclusivo en España, Andorra y Portugal

C/Periodista Badía 13, nave
46134 Foios, Valencia (España)
Tel.: + 34 960 077 777
info@thrmedicalproducts.com
www.thrmedicalproducts.com

